



Manual Utilizare

RO Cântar persoane
MY4050



Manual de utilizare

Vă mulțumim pentru că ați cumpărat cântarul de baie! Citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a-l folosi și de a-l repara, pentru consultări viitoare

Specificații produs

1. Capacitate: 180kg
2. Gradare: 0.1 kg


Baterii

Pentru acest cântar se folosesc 2 baterii AAA

Pentru măsurarea greutateii

Înainte de a folosi cântarul pentru prima dată, urmați pașii de mai jos:

1. Așezați cântarul pe o suprafață orizontală, plană. Acest lucru este obligatoriu – doar așa puteți obține rezultate precise. Apoi, așezați-vă direct pe cântar cu picioarele pentru a-l porni. Afișajul se va lumina, așa cum se poate observa în imaginea de mai jos, iar cântarul va rosti în limba engleza greutatea dumneavoastră așa cum este afișată:

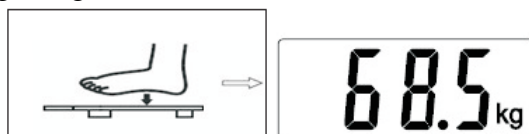

2. Unitatea implicită este „kg”. Dacă nu este cazul, setați din partea din spate a cântarului unitatea dorită (lb sau st).
3. Cântarul va arăta automat unitatea selectată.



4. LCD-ul va afișa greutatea dumneavoastră, așa cum se observă în imagine:



Cântarul se va opri automat după 15 secunde dacă nu mai este folosit.

Mențiuni

1. „C” va apărea în cazul în care cântarul nu este așezat pe o suprafață uniformă. În acest caz, greutatea afișată nu va fi cea reală și trebuie să vă cântăriți din nou.



2. „ERR” va apărea în cazul în care cântarul este supraîncărcat (peste 180kg/400lb).



3. „Lo” va apărea dacă bateria trebuie înlocuită.



Atenție!

1. Feriți cântarul de apă
2. Manevrați cu grijă cântarul
3. Nu așezați cântarul pe o suprafață neuniformă în timp ce vă măsurați greutatea
4. Nu călcați pe marginea platformei
5. Nu călcați pe cântar cu picioarele ude
6. Nu folosiți cântarul în condiții de interferențe electromagnetice
7. Scoateți bateriile dacă intenționați să nu folosiți cântarul pentru o perioadă lungă.
8. Nu încercați să desfaceți cântarul sau să-i scoateți componentele.

Reparațiile se vor face numai de tehnicieni calificați.

Important!

1. Cântarul pe care l-ați cumpărat este un instrument electronic de înaltă precizie. Acesta conține un senzor de precizie. Feriți cântarul de apă și nu-l scăpați pe jos!
2. Înlocuiți bateriile din timp. Deschideți capacul, înlocuiți bateriile vechi cu unele noi. Nu folosiți o baterie veche împreună cu una nouă.

RECICLAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE SI ELECTRONICE UZATE

Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare:

- Contactați autoritățile locale;
- Accesați pagina de internet: www.mmediu.ro
- Solicitați informații suplimentare la magazinul de unde ați achiziționat produsul

CE Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetică

RoHS Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).

Prin prezenta declarăm ca acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi pertinente din directiva 1999/5/CE ; În situația în care echipamentul nu este însoțit de declarația de conformitate aceasta se poate solicita la adresa de email : OFFICE@CES.NT.RO

CE  

